

La frontière
de la beauté
est redéfinie.

PLATEFORME MULTIFONCTION,
MODULAIRE POUR
LE VISAGE ET LE CORPS,
AVEC GESTION DE
LASER, RADIOFRÉQUENCE,
VÉHICULATION D'ULTRASONS,
REFROIDISSEMENT ET TRANSDERMIQUE.

07
biotec italia
Elite



biotec italia
Aesthetics


Plateforme multifonctionnelle Elite combine plusieurs technologies dans un appareil de haute technologie.

LE STYLE ET LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA RECHERCHE

Elite est une technologie unique innovante, combinant plusieurs technologies en un seul-f et système non invasif pour le corps et le visage

Cette combinaison est la clé d'un augmentation incroyable de la qualité des résultats esthétiques. Elite est une plateforme de technologies modulaires qui garantit efficacité absolue des traitements: Elite est un vrai générateur de beauté et bien-être avec un design exclusif.

Les protocoles de traitement uniques ont été développés par Biotec Italia afin de maximiser l'effet de chaque traitement, permettant ainsi une intervention sur des zones différentes avec un protocole adapté

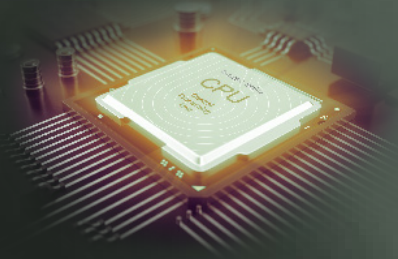

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES UNIQUES

Les plates-formes Biotec Italia présentent un nouveau concept basé sur la dernière conception matérielle et logicielle. Notre équipe R&D développe des solutions matérielles de nouvelle génération pour les industries médicales de haute technologie et de haute performance, permettant une mise à jour constante du système pour éliminer le problème de l'obsolescence technologique. Puissance et performances maximales, toujours garanties.



biotec italia

Elite

Faire progresser la fusion des technologies pour garantir une expérience unique ainsi que d'excellents résultats sur chaque zone du visage et du corps.


Excellents résultats sur chaque zone du visage et du corps.

Appareil unique

Innovant et design exclusif.

Des protocoles de traitement uniques

Différents champs d'applications

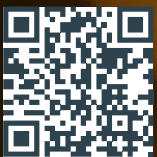

VIDÉO
DIDACTICIEL



youtube.com/user/biotecitalia

La conception de la machine peut légèrement différer de l'image, tout en conservant les fonctions décrites inchangées.

Raffermisssement de la peau du corps.

FLASH RF

FLASH RF utilise une application de vide pulsé qui améliore également la diffusion vasculaire dans la zone qui contribuent à l'efficacité du traitement en fournissant aux fibroblastes des besoins nutritionnels et en améliorant le drainage lymphatique.



Limph-drainage et tonifiant.

ENDOLASE

Trois technologies différentes: laser à diode bioactivante, refroidissement et roulement par contact, stimulation cutanée mécanique. Ces trois technologies agissent sur la peau et sur les bandes septales fibreuses pour améliorer la microcirculation, augmenter l'élasticité de la peau et favoriser le drainage lymphatique.



Remodelage des tissus profonds

SUB RF

SUB RF utilise une radiofréquence monopolaire capable de fournir de l'énergie au derme profond et aux sous-couches cutanées de la peau, tout en protégeant l'épiderme grâce à la technologie de refroidissement par contact.



Tratements de la cellulite

SONOBEAT

L'échographie et le vide rythmique combinés atténuent les symptômes de la cellulite et améliorent la circulation grâce à plusieurs mécanismes: la perturbation cellulaire et la fibrose due à l'effet ultrasonique.



Elimination de la graisse

BIOSHAPE

BIOSHAPE est une nouvelle méthode d'élimination de la graisse corporelle et de rajeunissement de la peau, utilisant le vide, le refroidissement contrôlé et une combinaison de fréquences électriques, qui, doucement et progressivement, réduit la couche de graisse tout en restaurant le contour de la peau.



La variété des applications de traitement augmentent de manière surprenante la qualité des résultats esthétiques.

Raffermisssement superficiel de la peau. **FLASH CTR**

FLASH CTR émet une radiofréquence bipolaire avec le vide, qui est transféré dans le derme superficiel, créant un échauffement uniforme, stimulant ainsi la contraction et la régénération des fibres de collagène.



Raffermisssement profond de la peau.

SUB CTR

SUB CTR fonctionne en produisant de la chaleur lorsque la résistance électrique du tissu convertit le courant électrique en énergie thermique plus profondément dans le derme.



Raffermisssement fractionné de la peau

FRACTION RF

La procédure comprend la combinaison de radiofréquence, de microneedling et de vide pour traiter les tissus cicatriciels, les vergetures et lutter contre le laxisme cutané.



Livraison transdermique.

MESO

La méso électroporation utilise les propriétés des impulsions de haute intensité pour assurer une pénétration profonde des formulations cutanées et des ingrédients actifs.

Il utilise des courants modulés à faible intensité qui créent de nouvelles voies extracellulaires. L'électroporation agit directement sur la peau, augmentant temporairement la perméabilité du tissu.



Biosculptage facial.

FACEFORM

FACEFORM fait référence à la biosculpture du contour du visage et est basé sur la stimulation mécanique du tissu cutané, associée à l'avantage d'une séquence de fréquences différentes et avec des cycles de refroidissement.

La stimulation faciale multidimensionnelle à différentes profondeurs de peau accomplit des actions esthétiques spécifiques, aidant à libérer les graisses, drainer, combler les rides, raffermir la peau et traiter le relâchement de la fibrose.



ELITE PLATFORM

Un maximum de confort et de satisfaction.

SÉCURITÉ

Fiabilité et sécurité pendant tout le traitement grâce à une procédure aux normes et des protocoles de traitement innovants.

AUCUN TEMPS D'ARRÊT

Reprise des activités quotidiennes normales immédiatement après le traitement.

PAS DE DOULEUR


Confort garanti pendant le traitement, grâce à l'ergonomie des pièces

“

J'ai obtenu de grands résultats, maintenant je me sens encore plus belle

”



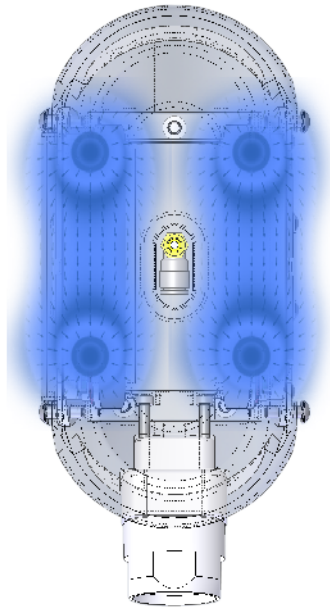

Elite: Casser les limites de la technologie

Les technologies les plus efficaces
dans un appareil de traitement
de haute technologie.

Excellents résultats sur n'importe quelle zone du
corps.



Le seul appareil en son genre disponible sur le
marché

Jamais obsolète: extensible et évolutif

Design innovant et exclusif.

Protocoles de traitement uniques éprouvés en
clinique.

Procédure sur mesure pour traiter chaque zone
du corps avec différents types de technologies.

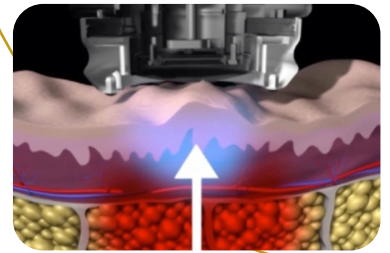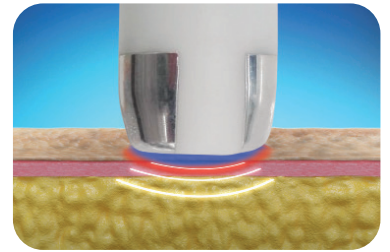


NOUVELLES PIÈCES À MAIN
MULTIFONCTIONS

Résultats testés cliniquement.



Avant

Après 1 séance

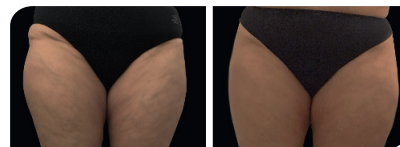


Avant

60 jours après 1
séance



Before

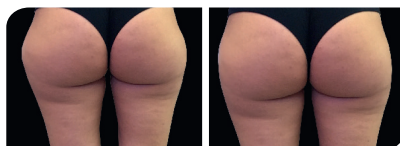

Avant

60 jours après 1
séance



Avant

60 jours après 2
séances



90 jours
après la
1ère
séance


Indications de traitement.

- LAXITÉ CUTANÉE
- PEAU ÉPAISSIE
- TACHES CUTANÉES
- CICATRICES ET VERGETURES
- RIDES SUPERFICIELLES ET PROFONDES
- PERTE DE L'OVALE DU VISAGE
- IMPERFECTIONS CUTANÉES
- PORES OUVERTS
- GRAISSES LOCALISÉES
- CELLULITE
- RÉDUCTION DE L'ADIPOSITÉ ABDOMENNE
- RÉDUCTION DE L'ADIPOSITÉ DE LA HANCHE
- RÉDUCTION DE L'ADIPOSITÉ DE LA CUISSE
- RÉDUCTION DE L'ADIPOSITÉ DU BRAS
- RÉDUCTION DE L'ADIPOSITÉ DANS LA ZONE SUBCAPOLAIRE

Données techniques

TENSION PRINCIPALE	230Vac 50/60Hz
PUISSANCE MAXIMUM	600VA
FUSIBLES	2 x F4AL 250V
CLASSE DE SÉCURITÉ ET TYPE DE PIÈCE APPLIQUÉE	I BF
DIMENSIONS	680x470x1400mm
POIDS MAXIMUM AVEC LES PIÈCES À MAIN	63Kg


CFU

FREQUENCE	3mHz	
PROFONDEUR FOCALE	FROM 1,5 mm TO 11 mm	

MESO

FREQUENCE	1kHz	
INTENSITÉ MAXIMALE SUR LA PLAQUE	0.8mA TO 10cm ²	


FRACTION RF

FONCTION DE LA PIÈCE À MAIN	MONOPOLAIRE	
FREQUENCE	400÷1000KHz	
PUISSANCE MAXIMUM	25W	
INTENSITÉ DE VIDE MAXIMALE	-50cmHg	


FACEFORM & BIOSHAPE

TEMPERATURE MINIMUM	0° C	
MODE DE FONCTIONNEMENT	CONTINU	
INTENSITE DE VIDE MAXIMALE	-50cmHg	


FLASH CTR & FLASH RF

FONCTION DE LA PIÈCE À MAIN	BIPOLAIRE	
FREQUENCE	400÷1000KHz	
PUISSANCE MAXIMUM	MAX 50W	
INTENSITÉ DE VIDE MAXIMALE	-50cmHg	

SUB CTR & SUB RF

FONCTION DE LA PIÈCE À MAIN	MONOPOLAIRE	
FREQUENCE	400÷1000KHz	
PUISSANCE MAXIMUM	MAX 50W	
INTENSITE DE VIDE MAXIMALE	-50cmHg	

SONOBEAT

MODE DE FONCTIONNEMENT	CONTINU/PULSE	
INTENSITE MAXIMUM	1.5 W/cm ²	
FRÉQUENCE ULTRASONS	1mHz	
INTENSITÉ DE VIDE MAXIMALE	-50cmHg	

ENDOLASE

N ° DIODES LASER	4	
LONGUEUR D'ONDE	980nm	
DENSITÉ DE PUISSANCE	MAX 10mW/cm ²	
INTENSITE DE VIDE MAXIMALE	-50cmHg	



biotec italia
Aesthetics